

Nuestra misión

Fomentar una cultura de innovación.
Liderar soluciones de atención médica.
Simplificar la atención compleja.



www.soleohealth.com

Administración de medicamentos mediante la bomba Curlin 6000



ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS MEDIANTE LA BOMBA CURLIN 6000

El farmacéutico de Soleo Health mezcló su medicamento previamente y lo colocó en una bolsa plástica. Almacene todos los medicamentos según las indicaciones. Algunos medicamentos se deben mantener refrigerados para que conserven su estabilidad.

- Revise la etiqueta de cada bolsa para ver que incluya su nombre, el nombre del medicamento, el volumen y la fecha de vencimiento del medicamento.
- Cada dosis debe estar libre de grietas, escapes, objetos flotantes y decoloración. Si tiene alguna duda, llame al farmacéutico de Soleo Health.
- Saque una dosis del refrigerador una (1) hora antes de la infusión para permitir que el medicamento alcance la temperatura ambiente. **NUNCA CALIENTE NI META AL MICROONDAS** el medicamento.
- Use cada bolsa solo una vez.
- Cambie la sonda IV según las indicaciones del enfermero.
- La sonda se usa durante 24 horas completas, independientemente del número de dosis. Si tiene varias dosis pendientes en un período de 24 horas, le darán tapas para colocar en el extremo de la sonda entre dosis.

ESCANEE EL CÓDIGO QR ABAJO PARA VER EL VIDEO



PASO 1

Lávese bien las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Séquelas con una toalla de papel. Use la toalla para cerrar el grifo.

PASO 2

Limpie el lugar de trabajo y reúna los suministros necesarios.

1. BOLSA DE MEDICAMENTOS



2. BOMBA



3. TOALLITAS CON ALCOHOL



4. JUEGO DE SONDAS INTRAVENOSAS



5. JERINGAS DE ENJUAGUE



6. CONTENEDOR PARA OBJETOS PUNZANTES





PASO 3

Examine el lugar de la IV en busca de:

ENROJECIMIENTO

HINCHAZÓN

SENSIBILIDAD

CALOR

SI HAY ALGÚN CAMBIO, NO INFUNDA Y COMUNÍQUESE CON EL ENFERMERO.

PASO 4

Revise su medicamento.

¿ESTÁ VENCIDO?

¿ESTÁ SU NOMBRE EN LA ETIQUETA?

¿ES EL MEDICAMENTO ADECUADO?

¿HAY MOTAS VISIBLES O PARTÍCULAS FLOTANTES EN EL MEDICAMENTO?





PASO 5

Quite la sonda del envoltorio y cierre las pinzas. Quite las cubiertas protectoras del puerto de administración IV de la bolsa y de la punta de la sonda intravenosa. Inserte la punta en el puerto de administración, asegurándose de no tocar la punta.



PASO 9

Gire el brazo de la puerta de la bomba hasta la posición abierta.

PASO 6

Rompa la pestaña amarilla de la válvula de flujo libre.

Nota: Si sus bolsas ya tienen la sonda conectada, es posible que ya no tengan la pestaña amarilla.



PASO 10

Coloque la sonda en la bomba insertando el clip amarillo en la ranura marcada con la flecha amarilla.



PASO 7

- Saque el aire de la sonda apretando la pinza de flujo libre amarilla, permitiendo que la sonda se llene de líquido.
- Si la sonda IV tiene un filtro, sostenga el filtro en posición vertical hasta que esté completamente lleno de líquido y vea que el líquido continúa pasando el filtro hasta el final de la línea.



PASO 11

Inserte el clip azul en la ranura marcada con la flecha azul.

PASO 8

Abra la puerta de la bomba levantando la palanca en la parte superior de la bomba.



PASO 12


Cierre el brazo de la puerta de la bomba. Tenga cuidado de no atrapar la sonda en el cierre de la puerta.





PASO 13

Haga clic en la palanca de la puerta hacia abajo para bloquearla en la posición cerrada.

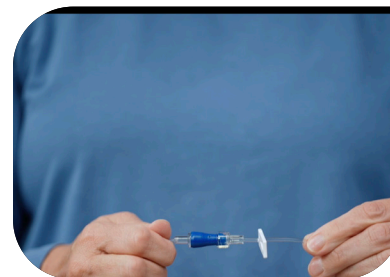

PASO 17

Conecte la sonda IV al conector sin aguja y afloje la pinza de la sonda IV.

PASO 14

Limpie el extremo del conector sin aguja con una toallita con alcohol. Deje que se seque al aire. No lo seque con papel ni con el ventilador.



PASO 18

Encienda la bomba presionando la tecla naranja ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO). La bomba hará una autocomprobación y luego emitirá un pitido tres veces.



PASO 15

Quite la tapa del enjuague de solución salina. Sosteniendo la jeringa en posición vertical, tire suavemente del émbolo hacia atrás para aflojarlo y luego empujelo hacia arriba para sacar el aire de la jeringa.



PASO 16

Conecte la jeringa con solución salina al adaptador del catéter empujándola y girándola firmemente. Enjuague suave, pero firmemente el catéter con ____ mL de solución salina.

Llame a su enfermero si no puede enjuagar el catéter o si es más difícil de lo habitual.



PASO 20

Seleccione **PROGRAM** (PROGRAMAR) presionando la tecla **YES/ENTER** (SÍ/ENTER). La pantalla cambiará para mostrar **REPEAT Rx** (REPETIR RECETA) y **NEW PROGRAM** (NUEVO PROGRAMA).





PASO 21

El farmacéutico o el enfermero de Soleo Health deben programar la bomba previamente. Mueva el cursor (área resaltada) a **REPEAT Rx** (REPETIR RECETA) presionando la tecla de flecha hacia abajo.

PASO 22



Seleccione la opción **REPEAT Rx** (REPETIR RECETA) presionando la tecla **YES/ENTER** (SÍ/ENTER).




PASO 23

La configuración programada aparecerá en las siguientes dos pantallas para que la revise. La pantalla se desplazará automáticamente. Ahora aparecerá la pantalla **RUN OPTIONS** (OPCIONES DE INICIO). Presione el botón **RUN/PAUSE** (INICIAR/PAUSA) para iniciar su infusión.

PASO 24



Cuando se complete la infusión, presione el botón **RUN/PAUSE** (INICIAR/PAUSA), luego presione el botón **ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO) para apagar la bomba.

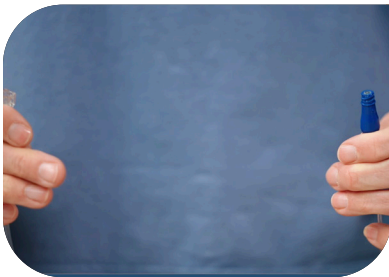

PASO 25

Desconecte la sonda de su conector IV sin aguja.

PASO 26



Limpie el conector IV sin aguja con alcohol y enjuague el catéter IV con solución salina como lo hizo antes. Limpie nuevamente el extremo del conector IV sin aguja con alcohol y déjelo secar al aire. Continúe con un enjuague con heparin si le dan instrucciones de hacerlo, usando la cantidad que le recetaron. *Llame al enfermero si no puede enjuagar el catéter o encuentra resistencia.*



PASO 27

Para quitar la sonda de la bomba, levante la palanca en la parte superior de la bomba y gire el brazo de la puerta de la bomba a la posición abierta.

PASO 28



Quite la sonda de la bomba.



PASO 29

Descarte la bolsa de medicamento y la sonda usados en el contenedor de desechos correspondiente.

NOTAS
