

Nuestra misión

Fomentar una cultura de innovación.
Liderar soluciones de atención médica.
Simplificar la atención compleja.



www.soleohealth.com

Administración mediante Mini Bag Plus



ADMINISTRACIÓN MEDIANTE MINI BAG PLUS

Almacene todos los medicamentos según las indicaciones. Algunos medicamentos se deben mantener refrigerados para que conserven su estabilidad.

- Revise la etiqueta de cada bolsa para ver que incluya su nombre, el nombre del medicamento, el volumen y la fecha de vencimiento del medicamento.
- Cada dosis debe estar libre de grietas, escapes, objetos flotantes y decoloración. Si tiene alguna duda, llame al farmacéutico de Soleo Health.
- Use cada vial y bolsa solo una vez.
- Cambie la sonda IV según las indicaciones del enfermero.
- La sonda se usa durante 24 horas completas, independientemente del número de dosis. Si tiene varias dosis pendientes en un período de 24 horas, le darán tapas para colocar en el extremo de la sonda entre dosis.

ESCANEE EL CÓDIGO QR ABAJO PARA VER EL VIDEO



PASO 1

Lávese bien las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Séquelas con una toalla de papel. Use la toalla para cerrar el grifo.

PASO 2

Limpie el lugar de trabajo y reúna los suministros necesarios.

1. VIAL Y BOLSA DE MEDICAMENTO



2. SONDA IV



3. TOALLITAS CON ALCOHOL



4. JERINGAS DE ENJUAGUE



PASO 3

Examine el lugar de la IV en busca de:

ENROJECIMIENTO

HINCHAZÓN

SENSIBILIDAD

CALOR

SI HAY ALGÚN CAMBIO, NO INFUNDA Y COMUNÍQUESE CON EL ENFERMERO.

PASO 4

Revise su medicamento.

¿ESTÁ VENCIDO?

¿ESTÁ SU NOMBRE EN LA ETIQUETA?

¿ES EL MEDICAMENTO ADECUADO?

¿HAY MOTAS VISIBLES O PARTÍCULAS FLOTANTES EN EL MEDICAMENTO?






PASO 5

Doble hacia arriba y luego hacia abajo para romper el sello. Sostenga la bolsa con el vial hacia abajo. Apriete la solución en el vial hasta llenarlo hasta la mitad. Gire para suspender el medicamento en la solución, **NO LO AGITE**.

PASO 6

Sostenga la bolsa con el vial boca abajo. Apriete la bolsa para forzar la entrada de aire en el vial. Presione para vaciar el medicamento suspendido del vial.

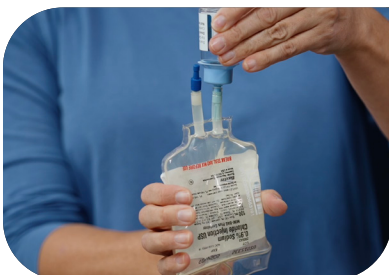

PASO 7

Repita estos pasos hasta que el vial esté vacío de medicamento y la solución esté completamente mezclada. Asegúrese de que el medicamento esté completamente disuelto. **NO quite el vial de medicamento**.

PASO 8

Retire el protector del puerto. Cuelgue la bolsa en el soporte para infusión intravenosa. Asegúrese de que el vial esté vacío de medicamento y solución.



PASO 9

Saque la sonda del envoltorio y cierre la pinza.

PASO 10

Quite las cubiertas protectoras de la punta de la sonda intravenosa. Inserte la punta en el puerto de administración, asegurándose de no tocar la punta.



PASO 11

Presione la cámara de goteo de la sonda hasta llenarla hasta la mitad.

PASO 12

Abra la pinza para llenar la sonda con líquido. Deje que la sonda se llene completamente. Cuando el fluido llegue al final de la sonda, cierre la pinza.



PASO 13

Limpie el extremo del conector sin aguja con una toallita con alcohol. Deje que se seque al aire. No lo seque con papel ni con el ventilador.

PASO 14

Quite la tapa del enjuague de solución salina. Sosteniendo la jeringa en posición vertical, tire suavemente del émbolo hacia atrás para aflojarlo y luego empujelo hacia arriba para sacar el aire de la jeringa. Conecte la jeringa con solución salina al adaptador del catéter empujándola y girándola firmemente. Enjuague suave, pero firmemente el catéter con ____ mL de solución salina.



PASO 15

Limpie el extremo del conector sin aguja con una toallita con alcohol. Deje que se seque al aire. No lo seque con papel ni con el ventilador.



PASO 16

Quite la tapa protectora del extremo de la sonda y conéctelo a la sonda del conector sin aguja.




PASO 17

Si la sonda tiene un dial, ajústelo al flujo que le recetaron. Abra la pinza para iniciar la infusión. Cuando finalice la infusión, cierre la pinza.



PASO 18

Desconecte la sonda del conector sin aguja.

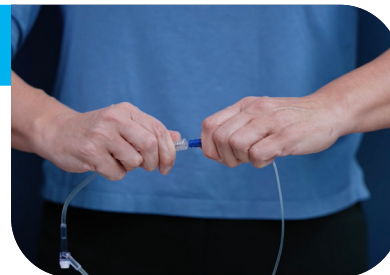

PASO 19

Limpie el extremo del conector sin aguja con una toallita con alcohol. Deje que se seque al aire. No lo seque con papel ni con el ventilador.



PASO 20

Enjuague el catéter IV con solución salina y limpie el extremo del conector sin aguja con una toallita con alcohol como lo hizo antes. Si así se lo indicaron, continúe con un enjuague de heparin usando unidades/mL ____mL. Llame al enfermero si no puede enjuagar el catéter o encuentra resistencia.



PASO 21

Ponga una tapa antimicrobiana al conector sin aguja, si le dieron una.



PASO 22

Si está administrando dos o más dosis por día, coloque una tapa en el extremo de la sonda, si le dieron una. Mantenga la punta en la bolsa del medicamento completado hasta que esté listo para agregar la siguiente dosis. Si hay aire en la sonda de la dosis anterior, cebe la sonda según las instrucciones.



PASO 23

Después de administrar la última dosis correspondiente a un período de 24 horas, descarte la bolsa del medicamento y la sonda usados en el contenedor para desechos correspondiente.

